

# 移動式簡易浴槽 ユーラック 使用説明書

使用方法を守り、正しくお使い下さい。

有限会社 東海技研

静岡県御前崎市池新田 3198-2

Tel:0537-86-8770 / Fax:0537-86-8934

①



コの字の大きい方をベット側にして、頭の位置を合わせます。


②



ベット側のパイプを本体フレームから外し、グリップ部分を縮めてから上に乗っても痛くない様にマットの下に入れる。

入浴者を半身起こし、シートをあてがい倒しながらシート上に乗せる。

③

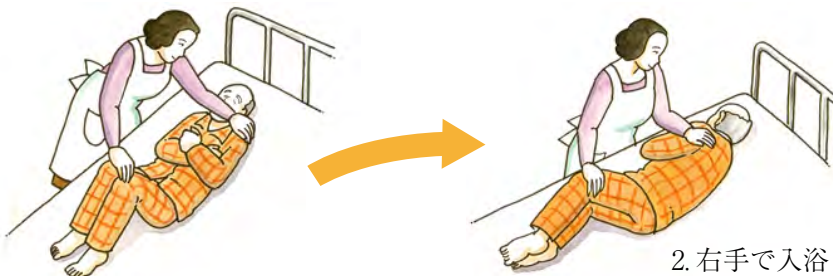

1. 入浴される方の腕と胸の上でしっかり組ませて、両ひざを深く立てる。

2. 右手で入浴される方のひざを手前に倒す。次に、左手で入浴される方の左の肩を手前に引き上げるようにする。(同時にはしない)

入浴される方を横向きにしてシートを敷く。

④



頭部側のパイプを本体フレームにセットし、入浴者を浴槽シートの中央に正しく乗せます。中図の様に足側のグリップを持ち、本体フレームにセット出来る所までベッドを下げセットします(足側のボードが外れるタイプのベッドの場合、予めボードを外しておく事で、グリップを持つ必要がなくなり楽にセットできます)。そのまま浴槽シートとベッドが離れるまで下げます。

※右図の様にたるまないようにするためにマジックバンドで固定する。

⑤



入浴場所に移動させ、排水ホースを浴槽シートの図9の排水栓に取り付けホースの先を排水させる所(排水溝・バケツ等)にセットする。

⑥

シャワーを自分の手に当て温度を確かめていただき、足の方からお湯をかけてください。肩までお湯が入ったら2～3分入浴していただき清拭剤をお湯に溶かし、タオルや入浴手袋でやさしく洗ってください。

⑦



入浴後、浴槽シートの排水栓を抜き、水を全部出します。タオルで体と浴槽シートを拭きます。排水ホースを外したら、体が冷えないよう乾いたバスタオルやタオルケット等で体を包んでから寝室へ移動させて下さい。

⑧

ベッドに移動して、ベッドの上に差し入れる。ベッドがフレームにつくまで上げる。

⑨

ベット側の両方のグリップを縮めて、マットの下に入れ、入浴者をベット上に移動させる。

### ⚠ 注意



動き出さない様にキャスターのロックをして下さい。



洗髪する時には、まわりに水気がかからないように洗髪用枕をご利用下さい。